



# CS2 ST LAVE-LINGE DÉSINFECTEUR

Affichage numérique de la température



Couvercle

Bouton de réinitialisation du générateur

Remplacer les clés

À conserver en lieu sûr

Panneau de contrôle

Affichage mains libres pour une désinfection visible

Insigne de numéro de série

Pédale

**MANUEL D'UTILISATION**

# DÉTAILS DE CONTACT

## VENTES:



01689 806500



sales@stanbridge.co.uk

## RECHANGE:



01689 806500



spares@stanbridge.co.uk

## SERVICE:



01689 806500



service@stanbridge.co.uk



## ADRESSE DU BUREAU:

Stanbridge Ltd.  
Unit 78  
Powder Mill Lane, Questor  
Dartford, Kent  
DA1 1JA



[www.stanbridge.co.uk](http://www.stanbridge.co.uk)

RETROUVEZ-NOUS SUR:



## AVERTISSEMENT


- N'essayez pas d'utiliser cette machine tant qu'elle n'a pas été correctement installée conformément à notre manuel d'installation.
- Veuillez lire les instructions détaillées avant de tenter de mettre la machine en marche.
- Un tableau de chargement plastifié au format A4 est inclus avec chaque machine – Veuillez fixer celui-ci au mur à proximité de l'appareil et vous assurer qu'il est bien visible pour les opérateurs de lave-bassins.
- Utilisez uniquement des produits de nettoyage et du matériel conçus pour l'acier inoxydable pour nettoyer l'extérieur de cette machine.
- Veuillez effectuer les contrôles de maintenance hebdomadaires sur le tableau plastifié fourni avec ce manuel d'utilisation.

## GARANTIE

- Tous les produits Stanbridge sont rigoureusement contrôlés avant de quitter notre site.
- Chaque machine est soumise à des tests opérationnels réels, au cours desquels un grand nombre de cycles complets sont effectués alors que la machine est « in situ » dans notre propre salle vidoir interne.
- Si un composant venait à présenter une défaillance due à un défaut de fabrication ou de main-d'œuvre dans les douze mois suivant la date d'expédition de notre usine, le composant défectueux devra nous être retourné pour inspection. Un composant de remplacement vous sera alors envoyé gratuitement à l'adresse de livraison initiale.

## OUVRIER LA MACHINE

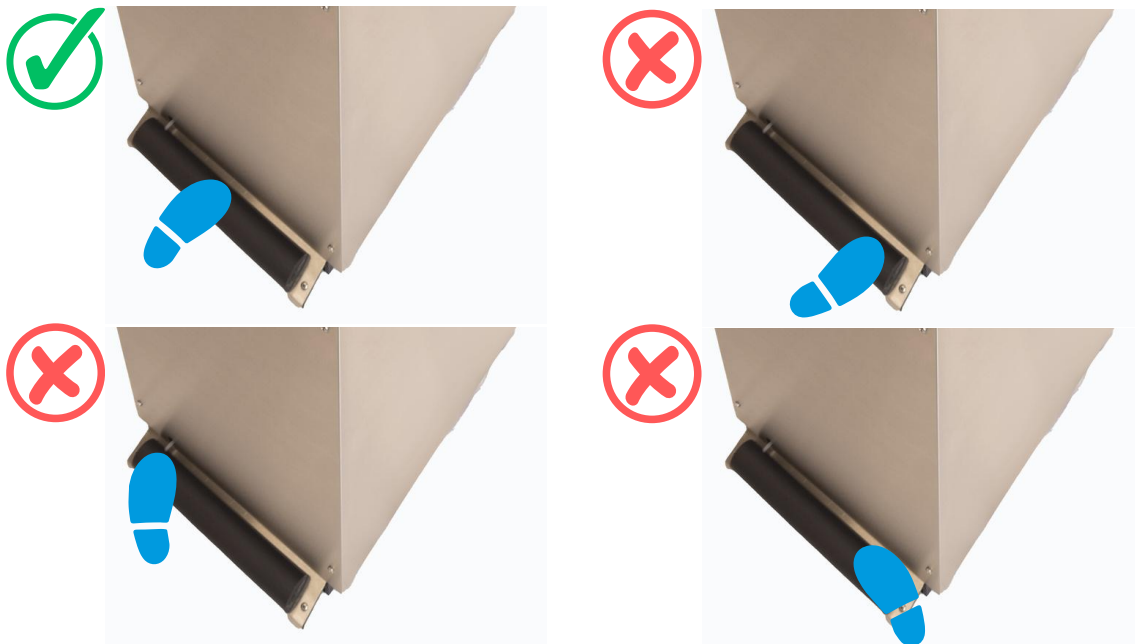

- Pour ouvrir la machine, appuyez avec le pied au centre de la barre, comme illustré.
- Veuillez vous assurer que votre pied est placé au centre de la pédale et qu'il recouvre entièrement la barre de commande.



## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

**NE PAS FROTTER LES CASSEROLES ET LES BASSIN DE LIT AVANT DE LES PLACER DANS LE LAVE-BASSIN DE LIT. SI VOUS UTILISEZ UN GEL SÉCURITAIRE, VIDEZ PRÉALABLEMENT LA CASSEROLE OU LA BOUTEILLE DANS L'ÉVIER ET RINÇEZ-LA.**

- Appuyez sur la pédale au centre de la barre pour ouvrir, comme indiqué ci-dessous.
- Placez le bassin et son contenu directement dans le lave-bassins, comme indiqué.
- Assurez-vous que le bassin est bien fixé dans le panier de la machine et orienté vers le jet d'eau.
- Fermez le couvercle – **NE LE CLAQUEZ PAS.**
- Sélectionnez le programme de lavage :

Pour la bouteille, APPUYEZ	
Pour les casseroles sales, APPUYEZ	

- Retirez vos gants et votre tablier et jetez-les dans la poubelle appropriée.
- Désinfectez-vous soigneusement les mains à l'aide du lavabo prévu à cet effet.

**UNIQUEMENT DES DÉCHETS HUMAINS ET DU PAPIER TOILETTE DANS LA CUVE**  
**Ne placez AUCUN autre objet dans la machine**

- Une fois le cycle de lavage terminé, ouvrez le couvercle à l'aide de la pédale, comme indiqué ci-dessous.
- Retirez les ustensiles et placez-les sur une grille pour les faire sécher.




## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Le laveur-désinfecteur décrit dans ce manuel est conçu pour laver et désinfecter les ustensiles indiqués sur la fiche technique fournie en page 6. Veuillez consulter ci-dessous les exemples de chargement corrects pour votre modèle CS2:



**VEUILLEZ VÉRIFIER QUE LA POIGNÉE DU POT DE TOILETTE EST BIEN POSITIONNÉE AU-DESSUS DU POT, COMME INDIQUÉ.**

**SI VOUS UTILISEZ DU GEL DÉSINFECTANT, VEUILLEZ VIDER PRÉALABLEMENT LE RÉCIPIENT OU LA BOUTEILLE DANS L'ÉVIER ET RINCER ABONDAMMENT AFIN D'ÉLIMINER TOUTE TRACE DE GEL.**

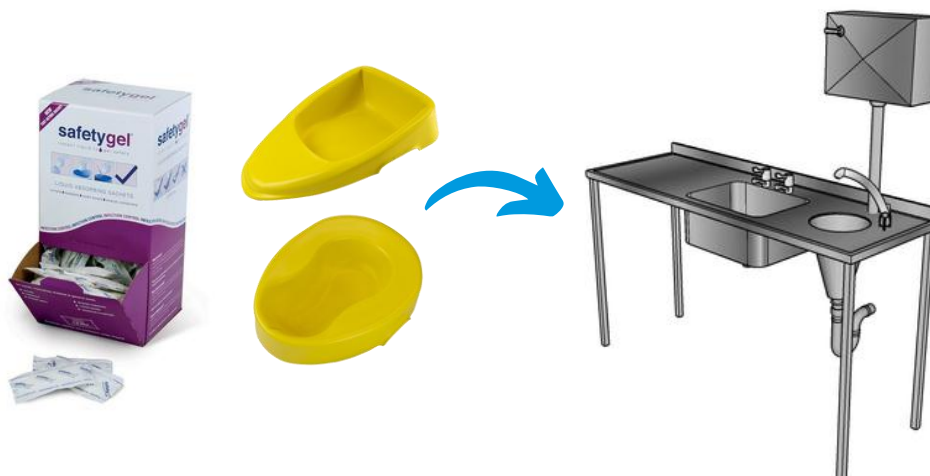

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Seuls les ustensiles approuvés par Stanbridge doivent être utilisés dans la machine. L'utilisation d'ustensiles non conformes pourrait entraîner un nettoyage ou une désinfection insuffisants. Un chargement incorrect pourrait également endommager la machine et affecter votre garantie.



## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

NE PAS placer d'autres objets dans la machine.




Pas de gants ni de tabliers



Pas de seringues



Pas de sacs en plastique

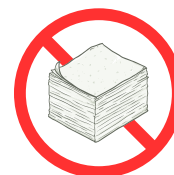

Pas de serviettes en papier



Pas de couches ni de protections hygiéniques



Pas de cotons-tiges ni d'écouvillons



Lingettes non humides


## DÉTAILS DE FONCTIONNEMENT ET DE CYCLE

Cette machine a été conçue pour inclure les fonctionnalités suivantes:

- Lavage de biberons
- Lavage de casseroles
- Désinfection : 80 °C pendant 70 secondes (la machine atteint 85 °C)
- Programmateur intégré avec diagnostic des pannes


MACHINE PRÊTE

LAVER

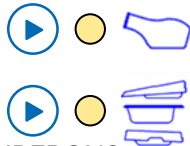


LAVAGE DE BOUTEILLES – COURSE À VÉLO

LAVER

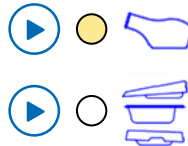

LAVAGE DES POÊLES – CYCLE EN MARCHÉ

LAVER

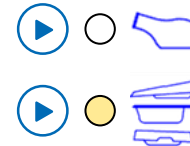

### LAVAGE DE BIBERONS

- Appuyez sur le bouton lavage biberon.

La machine effectuera les cycles suivants :

- Lavage à froid pulsé : 5 secondes de lavage, 5 secondes d'arrêt (8 fois) ou 40 secondes de lavage à froid seul.
- Pause. La machine s'arrête jusqu'à ce que la température à l'intérieur du récipient atteigne 80 °C.
- Une fois la température de 80 à 85 °C atteinte, la désinfection a lieu pendant 70 secondes.
- Rinçage à froid : 5 ou 10 secondes de lavage à froid ou à chaud seul.
- Cycle terminé. Après un léger délai, le couvercle peut être ouvert.

### LAVAGE DES CASSEROLE

- Appuyez sur le bouton « Lavage des casseroles ».

La machine effectuera les cycles suivants :

- Rinçage à l'eau froide
- Lavage à froid pulsé : 5 secondes de marche, 5 secondes d'arrêt (8 fois) ou 40 secondes de lavage à froid. Maintenez la pression.
- La machine s'arrête lorsque la température à l'intérieur du tambour atteint 80 °C.
- Une fois la température de 80 à 85 °C atteinte, une désinfection à froid est effectuée pendant 70 secondes.
- Rinçage : 5 ou 10 secondes de rinçage à froid ou à chaud.
- Cycle terminé. Après un léger délai, le couvercle peut être ouvert.



## SPÉCIFICATION

CAPACITÉ DE CHARGEMENT	CS1	CS2
Poêle à pantoufle	1	2
Dans le bac de lit	1	2
Pot de toilette et couvercle	1	2
Bassin carré*	1	1
Poêle à insérer pour commode	1	2
Support Transporteur*	1	2
Pot de toilette blanc et couvercle	1	2
Pot de Commode Gris	1	1
Bouteille d'urine	1	1
Temps de cycle (estimés)	6-12mins	6-12mins
Cycles de lavage	2	2
Approvisionnement en eau	Froid	Froid
Alimentation électrique (monophasée)	230V/50Hz/16a	230V/50Hz/16a
Panneaux en acier inoxydable	OUI	OUI
Dimensions H x L x P (mm)	915 x 435 x 655	915 x 435 x 655
Poids net (kg)	77	77

Sous réserve de modifications sans préavis. Les temps de cycle sont estimés et peuvent varier.

\*Peut nécessiter une cage spéciale



## LISTE DE CONTRÔLE DE L'ENTRETIEN DES MACHINES

N° DE SÉRIE DE LA MACHINE:

LISTE DE CONTRÔLE DE L'ENTRETIEN HEBDOMADAIRE	DATE DE SIGNATURE							
Détails								
Vérifier le fonctionnement de la machine - effectuer un cycle								
Vérifiez l'étanchéité de la porte								
Vérifier l'absence de fuites de vapeur								
Vérifiez que la température de désinfection affichée sur l'écran numérique est de 85								
Vérifier l'état général de la machine								
Vérifiez que tous les panneaux sont propres								
Vérifiez qu'aucune vis ne manque sur les panneaux								
Vérifier que la pédale fonctionne et est propre								
Vérifier l'état des ustensiles - les remplacer si nécessaire								
Une fois le cycle terminé, ouvrez la porte et:								
Vérifier l'état du joint								
Vérifier l'état du transporteur								
Vérifiez que le ou les jets rotatifs tournent librement								
Vérifiez que les jets ne sont pas obstrués								
Vérifier la propreté de la chambre								
Système de dosage:								
Vérifiez le niveau de liquide et faites l'appoint si nécessaire.								
Vérifier le fonctionnement de la pompe doseuse								

